

mei™



Gebruikershandleiding

Inhoud

Inleiding	3
Wat is het beoogde gebruik van mē?	3
mē systeem	4
Belangrijke veiligheidsinformatie	7
Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties	7
Waarschuwingen	9
Mogelijke bijwerkingen en huidreacties	10
Uw mē-systeem gebruiken	11
De huidgevoeligheid testen	12
Behandelen met mē	12
mē reinigen en bewaren	19
Zorg na de behandeling	20
Uw elōs-cartridge/scheerapparaat/epilator vervangen	
Gezichtsadapter	21
Reizen met mē	23
Problemen oplossen	23
Garantie en service	25
Gegevens van de fabrikant	26
Contactgegevens	29

inleiding

Proficiat met de aankoop van uw mē-systeem! mē is een innovatief apparaat dat u in alle vrijheid thuis kunt gebruiken om op een veilige en comfortabele manier ongewenst haar te verwijderen.

mē is het enige ontharingsapparaat voor thuisgebruik dat gebruikmaakt van de gepatenteerde elōs technologie en waarvan klinisch is bewezen dat het veilig en doeltreffend werkt voor alle huidtinten. Zacht, gebruiksvriendelijk en klaar in enkele minuten. Ervaar de vrijheid van een zijdezachte huid zonder eindeloos scheren en waxen.

Ga naar www.mepower.com, registreer uw me en bekijk de demonstratievideo, voordat u mē gebruikt.

wat is het beoogde gebruik van mē?

Huidtype

mē wordt op het lichaam en gezicht gebruikt en is geschikt voor ALLE huidtinten (de huidskleur waarmee u geboren bent).

Lichaam en gezicht:



Haarkleur

mē kan voor het grootste scala aan haarkleuren worden gebruikt.

Let op: Voor het beste resultaat is het aanbevolen om de epilator te gebruiken om natuurlijk lichtblond, rood en wit/grijs haar te verwijderen. De epilator mag niet op het gezicht worden gebruikt.

Wat is het beoogde gebruik van mē?

Lichaamsdelen

mē wordt bij mannen enkel op het lichaam gebruikt. Bij vrouwen kan hij ook onder de jukbeenderen gebruikt worden.

Let op: De gezichtsbehandeling verschilt van de lichaamsbehandeling. Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u met de behandeling begint

mē systeem

uw mē-pakket bevat:

- mē-systeem aangedreven door de elōs technologie
- één elōs-cartridge (al geplaatst)
- accessoiresbeschermingskap (al geplaatst)
- beschermingskap voor de elōs
- stroomkabel
- Gebruikershandleiding met een korte referentiegids
- garantiebewijs
- veiligheidsbril

extra mē-accessoires:

Afzonderlijk verkocht of inbegrepen in uw mē-systeem


- scheerapparaat
- epilator
- gezichtsadapter
- nieuwe elōs-cartridge
- etui voor opberging

Ga voor meer informatie over accessoires naar www.mepower.com.

mē systeem

onderdelen van het apparaat (Figuur 1):

1. voetstuk.
2. slede.
3. bedieningspaneel met:
 - ⏻ aan/uit-knop
 - Ⓜ elōs-knoppen voor energie-instellingen met 3 energieniveaus: Laag-Medium- Hoog
 - 🔊 de indicator voor het cartridgeniveau toont wanneer de elōs-cartridge leeg is en vervangen moet worden
 - Ⓜ accessoiresstartknop
4. applicator (handstuk met kabel).
5. elōs-cartridge met lichtvenster en RF-staafjes voor huidcontact.

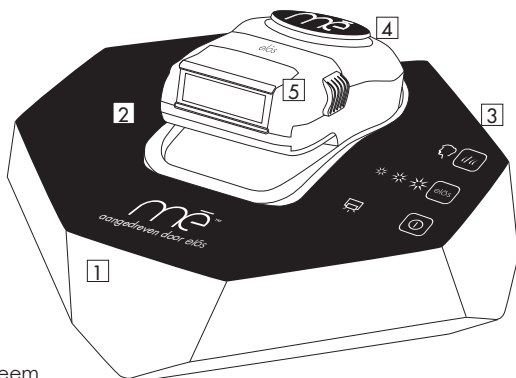


Figuur 1: mē systeem

mē systeem

onderdelen van de applicator (Figuur 2):

6. lichtvenster.
7. RF-staafjes voor huidcontact (Beide RF-staafjes moeten in volledig contact met de huid staan om licht te kunnen flitsen).
8. elös-cartridge: hoort bij de applicator en is geladen met elös-pulsen.
U moet de cartridge vervangen als het lampje van het cartridge-niveau op het voetstuk rood is.
9. elös-startknop.
10. afkoelingsopening.
11. accessoirebeschermingskap. *

*Als u nog geen nieuwe cartridge heeft – plaats dan de elös-beschermingskap op de plaats van de oude cartridge. Hierdoor worden de interne onderdelen van de applicator beschermd.

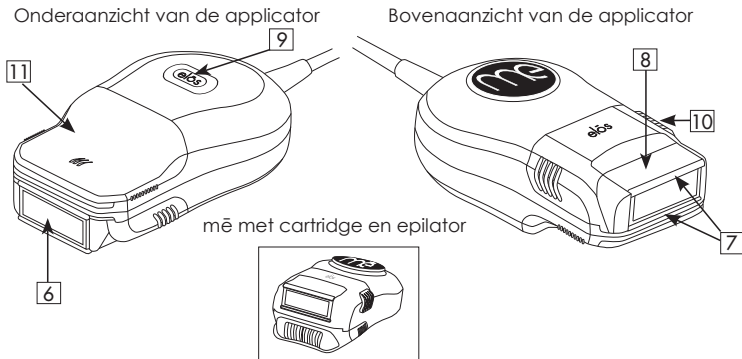

Figuur 2: Boven- en onderaanzicht van de applicator

Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit symbool verschijnt naast de informatie over mogelijke veiligheidsrisico's. Het mē-systeem kan niet door iedereen worden gebruikt. Lees deze gebruikershandleiding voordat u het mē-systeem gebruikt. Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen in acht neemt. Gebruik dit apparaat niet als het niet voor u is bedoeld (Zie het deel Contra-indicaties onderaan). Als u de waarschuwingen niet begrijpt of vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice via www.mepower.com.

Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties



NIET gebruiken als de huid, op de plaats die u wilt behandelen, gebrand of verbrand is.

NIET gebruiken als uw huid gebrand is door blootstelling aan de zon, zonnebanken of zelfbruinende crèmes in de afgelopen 2 weken. Het apparaat gebruiken op een gebrande of verbrande huid kan leiden tot een tijdelijke of permanente verkleuring (bleker of donkerder) van de huid. Als u niet zeker bent of uw huid gebrand of verbrand is,



gebruik het apparaat dan **NIET** gedurende 2 weken. Zorg ervoor dat u tijdens deze 2 weken de plaats die u wilt behandelen **NIET** blootstelt aan de zon.



NIET gebruiken als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft. mē werd niet getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.



NIET gebruiken als u lijdt aan epilepsie, door licht veroorzaakte toevallen of chronische migraine. De energieflitsen kunnen hoofdpijn of migraine veroorzaken.



NIET gebruiken op plaatsen waar u tatoeages, moedervlekken of sproeten hebt. Tatoeages of moedervlekken kunnen te veel lichtenergie absorberen, wat kan leiden tot een opzwellen van de huid, tijdelijke of permanente blaren of verkleuring of het bleker worden van de huid.



NIET gebruiken rond de ogen, op het hoofd, oren, tepels, genitaliën of rond de anus. Het apparaat op deze plaatsen gebruiken kan leiden tot een opzwellen van de huid, blaren of tijdelijke verkleuring of het bleker worden van de huid.

Wanneer de mē niet gebruiken/contra-indicaties



NIET gebruiken als u jonger bent dan 18 jaar. De gevolgen van het gebruik van mē voor deze leeftijdsgroep zijn niet bekend.



NIET gebruiken als u een huidziekte in de te behandelen zone heeft, zoals acne, zweren, psoriasis, eczeem, zonnebrand, herpes simples, open wonden of uitslag. Door deze omstandigheden kan de huid gevoeliger zijn aan licht en kan de behandeling onaangenaam worden en leiden tot een opzwellling van de huid, blaren of infecties. Wacht tot de getroffen zone genezen is, voordat u het apparaat op deze zone gebruikt. Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet of uw huid voldoende genezen is om het apparaat te gebruiken.

Het apparaat **NIET** gebruiken als u een voorgeschiedenis heeft van keloïde littekenvorming, gevoelig bent voor licht (fotosensitief) of medicatie neemt die de huid gevoeliger maakt voor licht, inclusief niet-steroïdale anti-onstekingsmiddelen, (bv. aspirine, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, fenothiazines, thiaziden, diuretica, sulfonyleurea, sulfonamides, DTIC's, fluoruracil, vinblastine, griseofulvine, hydroxycarbonzuren, Retin-A, Accutane en/of topische retinoïden.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon gedurende de volledige behandelingsperiode. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt. Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème gedurende de hele periode waarin u haar verwijderd. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, tijdelijke of permanente verkleuring of het bleker worden van de huid.



NIET gebruiken als u een actief implantaat zoals een pacemaker, een incontinentie-apparaat of een insulinepomp heeft. Het mē-systeem werd niet getest op personen met actieve implantaten en de gevolgen zijn daarom nog niet bekend.



NIET gebruiken als u de afgelopen 6 maanden behandeld bent met Accutane® (isotretinoïne). Hierdoor kan de huid gevoeliger zijn aan licht en kan de behandeling onaangenaam worden en leiden tot een opzwellling van de huid, blaren of infecties.

waarschuwingen



De buitenste lagen van het mē-apparaat of de cartridge **NIET** openen en de binnenkant niet aanraken. Dit is voor uw eigen veiligheid. Probeer uw mē-apparaat niet zelf te herstellen. Als u de mē probeert te openen en het apparaat daarbij beschadigt, vervalt uw garantie. Neem contact op met onze klantenservice via www.mepower.com als uw defect of beschadigde apparaat moet worden vervangen. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot elektrocutie of elektrische schokken.



Het mē-systeem **NIET** gebruiken in de wastafel/bad/douche of andere plaatsen waar het in contact kan komen met vloeistoffen of kan nat worden. Dit kan leiden tot elektrische schokken.



Als het systeem nat wordt of in een vloeistof valt, trek de stroomkabel dan onmiddellijk uit. Het systeem Niet uit de vloeistof verwijderen voordat u de stroomkabel hebt uitgetrokken. Gebruik het systeem Niet meer en neem contact op met onze klantenservice.



Houdt het lichtvenster **NIET** te lang op dezelfde plaats en flits geen meerdere lichtpulsen op hetzelfde stukje huid. Dit kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot opzwellen van de huid, blaren of een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid. Beweeg het behandelingsvenster na elke flits voorzichtig naar een andere plaats op de huid. Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.



mē **NIET** gebruiken als bepaalde onderdelen beschadigd zijn of lijken. Dit kan letsels tot gevolg hebben.



De ventilatiegleuven **NIET** bedekken tijdens gebruik, aangezien die ervoor zorgen dat het apparaat koel blijft tijdens gebruik. Door het bedekken van de ventilatiegleuven kan het apparaat oververhitten.



BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN! mē is een krachtig apparaat en mag niet door kinderen jonger dan 18 jaar worden gebruikt.

waarschuwingen



mē**NIET** zonder toezicht in het bereik van kinderen laten, aangezien de kabels kunnen leiden tot verstikking. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.



NIETgebruiken als uw huid gevoelig is aan licht. De lichtbehandeling zou onaangenaam kunnen zijn of kunnen leiden tot een opzwellings van de huid, blaren of infecties. Om te bepalen of u mē mag gebruiken, kunt u een test doen op een klein stukje huid. Wacht vervolgens 30 minuten en controleer of er huidreacties zijn. U mag mē alleen gebruiken als er geen huidreacties zijn en de huid normaal lijkt.
Zie de stappen voor het testen van de huid op pagina 12.



mē **NIET** gebruiken op plaatsen waar u wilt dat het haar terug groeit.

Het systeem **NIET**gebruiken als de kamertemperatuur hoger is dan 86°F (30°C).

Als het systeem opwarmt, zal het misschien niet naar behoren werken en letsels veroorzaken.

mogelijke bijwerkingen en huidreacties


mē gebruiken kan leiden tot mogelijke bijwerkingen.

Deze reacties zijn zeldzaam en zouden snel moeten verdwijnen.

Elke cosmetische behandeling kan echter bepaalde risico's inhouden.


Als u een van de volgende reacties krijgt, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en uw arts raadplegen: een mogelijk permanente verandering van de kleur of textuur van de huid, een erg rode huid, jeuk op de behandelde zone, plotselinge acne, blaren of een verbrande huid, permanent littekenvorming of verlies van huidweefsel of als er een ongewone pijn optreedt.

uw mē systeem gebruiken

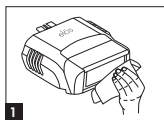

mē klaarmaken voor gebruik

1. Reinig het lichtvenster met een niet-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek. Hierdoor worden alle haartjes of stof van het behandelingsvenster verwijderd.

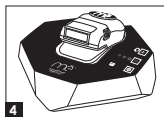

2. Sluit de stroomkabel aan op het mē-systeem.

3. Plaats het mē-systeem op een tafel of dichtbij een stopcontact. Verwijder mogelijke vloeistoffen van de plaats.



4. Zorg ervoor dat de applicator zich in de slede bevindt voordat u mē inschakelt.

5. Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.

6. Druk op de startknop om het systeem te starten. Wacht tot het lampje op de startknop groen wordt. Het systeem is nu klaar voor gebruik.



7. Selecteer het gewenste energieniveau: Laag, Medium of Hoog.

8. De cartridge is voorgeladen met flitsen.

Wanneer het lampje van het cartridgeniveau knippert, zijn er nog maar een beperkt aantal lichtpulsen in de cartridge en moet u een nieuwe klaarzetten. Als het lampje van het cartridgeniveau blijft branden, moet u de cartridge vervangen.


Let op: Begin op het elōs-niveau LAAG, en schakel daarna pas over naar een hoger elōs-niveau voor nog betere resultaten

de huidgevoeligheid testen

Als u het systeem voor de eerste keer of op een nieuwe plaats gebruikt, kies dan een klein stukje huid in de buurt van de plaats die u wilt behandelen om de gevoeligheid van de huid te testen: Gebruik het elös-niveau LAAG. Volg de onderstaande behandelingsinstructies en zorg ervoor dat u slechts 2-3 flitsen uitzendt. Wacht na de test 30 minuten en controleer uw huid op mogelijke reacties. Als uw huid na 30 minuten geen abnormale reacties vertoont, kunt u een volledige behandeling uitvoeren.

Behandelen met mē

Lichaam:

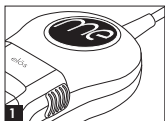

Stap 1. U kunt de accessoires van de mē zoals de epilator of het scheerapparaat gebruiken om haartjes te verwijderen. Als u deze accessoires gebruikt, moet u zich niet voorbereiden op de behandeling. U moet enkel controleren of het haar niet langer is dan 0,5 cm. Verwijder de beschermingskap en plaats de epilator- of scheercartridge in de plaats.



Als u de aangewezen scheer- of epilatoraccessoires van het mē-systeem niet gebruikt, scheer u dan met een scheermesje of een elektrisch scheerapparaat. Zorg ervoor dat de beschermingskap (meegeleverd) is geplaatst. Het systeem zal alleen werken als de beschermingskap of de epilator/scheerapparaataccessoire op de juiste plaats zit.



Stap 2. Reinig uw huid en wrijf droog met een handdoek.

Stap 3. Druk op de elös-knop op het voetstuk om het gewenste elösniveau te selecteren (Laag, Medium of Hoog). Druk nogmaals op de elös-knop om van Laag naar Medium te gaan of van Medium naar Hoog. Druk nogmaals op de elös-knop om terug naar Laag te gaan.

behandelen met mē

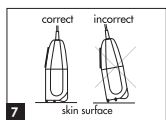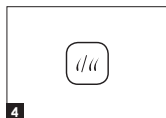

Het is aanbevolen om op het niveau Laag te beginnen en daarna pas naar een hoger elös-niveau te gaan.

Stap 4. Als u het scheerapparaat/epilator gebruikt, druk dan eenmaal op de accessoirestartknop op het bedieningspaneel. De epilator werkt nu op een lage snelheid. Druk nogmaals op de accessoirestartknop om de epilator op een hogere snelheid te laten werken. De cartridge voor het scheerapparaat werkt enkel op het snelheidsniveau 1.

Stap 5. Haal de applicator uit het voetstuk.

Stap 6. Druk op de elösstartknop op de applicator. U hoort de ventilator in de applicator starten.

Stap 7. Plaats de applicator voorzichtig op de huid, zodat de twee zilveren RF-staafjes volledig contact maken met de huid. De mē zal pulsen beginnen uitzenden.

Let op: De applicator werkt alleen als beide RF-staafjes de huid aanraken.

Stap 8. Beweeg de applicator na elke flits voorzichtig en met een vloeiende, frage beweging naar de volgende te behandelen plaats op de huid.

Let op: Als u de applicator 30 seconden niet gebruikt, schakelt hij vanzelf uit. Druk op de elös-startknop op de applicator om de applicator opnieuw in te schakelen.

Houd het lichtvenster **NIET** te lang op dezelfde plaats en flits geen meerdere lichtpulsen op hetzelfde stukje huid. Dit kan voor oververhitting zorgen en kan leiden tot een opzwellung van de huid, blaren of een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid. Beweeg de applicator na elke flits naar een andere plaats op de huid.

Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.

behandelen met mē

Stap 9. Voor het beste resultaat moet mē gebruikt worden volgens de behandelingstijden die hieronder wordt vermeld.

De minimale behandelingstijden die hieronder worden aangeraden kunnen verschillen van persoon tot persoon. We raden u aan om elke behandlingszone 2-3 keer met de pulsen te behandelen:



2 minuten



1 minuut per onderarm



2 minuten voor de bikinilijn



3 minuten per arm



10 minuten per volledig been



2 minuten per schouder



5 minuten voor de buik



6 minuten voor de borstkas



12 minuten voor de rug



Tips: Wanneer u moeilijke zones behandelt (bv. onderarmen), gebruik de applicator dan in twee richtingen: links/rechts en omhoog/omlaag voor een volledige dekking.

U kunt het volledige lichaam tijdens dezelfde sessie behandelen.


Richtlijnen voor behandelingen

Het is normaal dat u nog haartjes ziet na de eerste behandelingen. Voor het beste resultaat moet u de zone één keer per week gedurende 7 weken behandelen.

Als u maandelijks bijkomende onderhoudsbehandelingen doet na de eerste 7 behandelingen, zullen de ontharingsresultaten langer blijven.




behandelen met mē

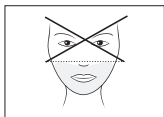

Gezicht:

Uw gezicht ontharen is helemaal anders dan uw lichaam ontharen. Het mē-apparaat is bedoeld om gezichtshaar onder de jukbeenderen te verwijderen, inclusief de snor/bovenlip, bakkebaarden, kaaklijn en kin/bovenkant van de hals. Het mē-apparaat is niet bedoeld om de wenkbrauwen, neushaar of oorhaar te behandelen. Lees dit onderdeel zorgvuldig voordat u uw gezicht behandelt met uw mē. Het is aanbevolen om voor het behandelen van uw gezicht de gezichtsadapter te gebruiken. De gezichtsadapter is speciaal ontworpen om de kleinere en gevoelige zones van uw gezicht te behandelen. Als de gezichtsadapter

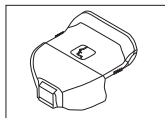

bevestigd is aan uw applicator, levert het energie door een enkele lichtpuls uit te zenden op het gewenste energieniveau. U kunt de gezichtsadapter samen met de mē kopen of afzonderlijk als een accessoire. Het ontwerp van de gezichtsadapter kan veranderen.


Huidtype

mē is geschikt voor alle huidtypes.

Gezicht:



Gebruik mē twee keer per week gedurende 2 weken om het gezicht te behandelen. Behandel het gezicht daarna om de twee weken voor een blijvend resultaat.

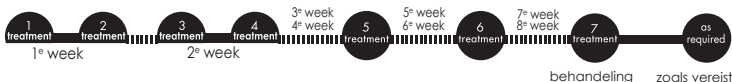

algemene informatie over het ontharen van het gezicht

Het haar op het gezicht verschilt fysiologisch gezien van het haar op andere lichaamsdelen. De groeicycli zijn anders en de kenmerken van het haar, zoals de diktheid, kleur en diepte van het haarzakje verschillen van lichaamshaar. Het gezicht is gevoeliger voor ontharing, omdat de zenuwen op bepaalde plaatsen van het gezicht erg gevoelig zijn. De huid op het gezicht en de hals wordt vaker aan de UV-stralen van de zon blootgesteld en is daarom gevoeliger dan de huid op andere lichaamsdelen.

behandelen met mē

Let op: Voor mannen is het niet aangeraden om de baard te behandelen, aangezien het oneven resultaten kan opleveren, wat uw gelaatskenmerken op een ongewenste manier kan veranderen.

wanneer mē niet op het gezicht gebruiken



Als uw gezicht verbrand of gebruid is, wacht dan tot de zonnebrand of de bruine kleur is verdwenen. Daarna kunt u een testpuls uitzenden op een niet zichtbare zone (zoals onder de kin). Controleer de zone na 3 dagen op reacties. Als er geen zichtbare reacties zijn, mag u met de behandeling starten.



Raadpleeg uw arts als u in de afgelopen 3 maanden een professionele gezichtsbehandeling hebt laten doen (zoals een chemische peeling, lasering, een behandeling met licht of radiofrequenties of als u huidvullers hebt laten injecteren).



Raadpleeg uw arts als u in de afgelopen 3 maanden een chirurgische ingreep aan het gezicht hebt laten uitvoeren (zoals een facelift of een facial implant) of als u nog niet helemaal bent hersteld van een ingreep.



Raadpleeg uw arts als u medicatie neemt die u gevoelig maakt voor de zon of als u een voorgeschiedenis heeft van huidziekten, voordat u mē op het gezicht of lichaam gebruikt.

Raadpleeg de algemene lijst van Contra-indicaties aan het begin van deze Gebruikershandleiding.

waarschuwingen



NIET boven de jukbeenderen gebruiken.

Gebruik de epilator of scheeraccessoires **NIET** als u het gezicht behandelt met mē.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon gedurende de volledige behandelingsperiode. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt.



Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème

behandelen met mē

(minstens 30 SPF) gedurende de hele periode waarin u zich onthaart. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, tijdelijke of permanente verkleuring of het bleker worden van de huid.



NIET gebruiken op de oogkas of rond de ogen.



NIET gebruiken om uw wenkbrauwen vorm te geven! Let op dat u dit apparaat niet op uw wenkbrauwen gebruikt, aangezien ontharing op deze plaats blijvend kan zijn.



Bij mannenNIET voor de baard gebruiken. Dit kan leiden tot een ongewenst ontharingsresultaat.



NIET gebruiken op moedervlekken of sproeten. Bescherm kleine, gevoelige plaatsen op de huid zoals moedervlekken en sproeten door een witte eyeliner te gebruiken. Als u grote plaatsen op de huid hebt die gevoelig zijn, kunt u karton of dik papier gebruiken om deze plaatsen te bedekken, zodat ze niet aan de behandeling worden blootgesteld. Bescherm uw lippen en de liprand door een witte eyeliner te gebruiken.



NIET gebruiken op tatoeages of permanente make-up.



NIET gebruiken op de schedel.



NIET gebruiken in de neus of oren, aangezien dit gevoelige plaatsen zijn.





Vermijd plaatsen waar alleen vellusharen (heel dun, fijn haar, wordt ook "donshaar" genoemd) groeien. Dit kan leiden tot het ongewenst teruggroeien van haar. In het geval dat u veranderingen in het pigment op uw gezicht kan waarnemen, stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.



Gebruik de eerste uren na een behandeling GEEN geproduceerde producten of make-up, omdat dit tot irritaties kan leiden. Als u tijdens de behandeling een ongewone pijn voelt, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen. Uw huid kan tot 24 uur na de behandeling rood zijn. Als de symptomen langer dan 24 uur aanhouden, en/of u pijn hebt en/of mogelijke ernstige bijwerkingen ondervindt, moet u de behandeling stopzetten en uw arts raadplegen.

behandelen met mē

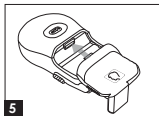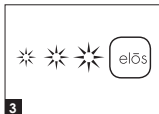

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig uw huid en verwijder het haar op het huidoppervlak. U kunt het haar op uw gezicht verwijderen met een pincet, wax, een scheermes, enz. maar niet met een epilator.
2. Voer de behandeling uit op een plaats met aangenaam en voldoende licht. Schakel uw mēapparaat in. Selecteer op het voetstuk het elōs-niveau LAAG. Het apparaat werkt alleen als u een elōs-niveau hebt gekozen.
3. Zet de meegeleverde veiligheidsbril of een zonnebril op. Het is aanbevolen om uw ogen te beschermen, want de huid dichtbij uw ogen behandelen kan leiden tot tijdelijk ongemak of pijn.

Met de gezichtsadapter

4. Verwijder de accessoirebeschermingskap en sluit de gezichtsadapter aan. Dankzij de gezichtsadapter kan het systeem enkele lichtpulsjes uitzenden op het gewenste energieniveau.
5. Druk op de startknop van de elōscartridge op de applicator om de applicator in te schakelen. Plaats de applicator voorzichtig op de zone die u wilt behandelen. Druk op de elōs-startknop om een puls uit te zenden.
6. Verplaats de applicator naar de volgende te behandelen zone en druk nogmaals op de elōs-startknop om een nieuwe puls uit te zenden. Herhaal de vorige stappen tot u het hele gezicht hebt behandeld. **Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw**

behandelen met mē

behandelt.

Zonder de gezichtsadapter


4. Druk op de elōs-startknop op de applicator om de applicator in te schakelen.

Plaats de applicator voorzichtig op de zone die u wilt behandelen. Als u contact met de huid maakt, zal een lichtpuls worden uitgezonden. Verwijder de applicator na elke lichtpuls.


5. Verplaats de applicator naar de volgende te behandelen zone. Er wordt een nieuwe puls uitgezonden. Verwijder de applicator na elke puls. Herhaal de vorige stappen tot u het hele gezicht hebt behandeld. Wacht minstens 10 seconden voordat u dezelfde plaats opnieuw behandelt.

Let op: Begin de behandeling altijd op het elōs-niveau LAAG. Als u zich comfortabel voelt, kunt u overschakelen naar een hoger elōs-niveau voor nog betere resultaten


mē reinigen en bewaren

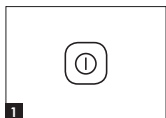

1. Schakel het systeem uit door op de startknop op het voetstuk te drukken.

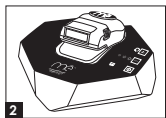

2. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk en trek de stroomkabel uit het stopcontact.

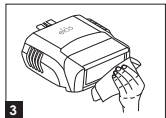

3. Reinig het lichtvenster van de cartridge met een niet-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek.

4. Als u de aangewezen mē-epilator of scheerapparaat hebt gebruikt: Haal het scheerapparaat of de epilator uit de applicator en plaats de beschermingskap in de plaats. Gebruik een tandenborstel om de accessoires te reinigen. Het is aanbevolen om een zachte doek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

5. Als u de aangewezen mē-gezichtsadapter hebt gebruikt: Haal de gezichtsadapter uit de applicator en plaats de beschermingskap in de plaats. Reinig het buitenste oppervlak door ALLEEN een droge,

mē reinigen en bewaren

zachte zoek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

6. Reinig het buitenste oppervlak van het mē-systeem door ALLEEN een droge, zachte zoek of een niet-alcoholisch reinigingsdoekje te gebruiken.

7. Bewaar het systeem op een koele en droge plaats, BUITEN HET BEREIK van kinderen.

zorg na de behandeling

Was uw huid voorzichtig met lauw water en dep daarna droog.



De behandelde zones **NIET** blootstellen aan de zon. Wacht minstens 2 weken na de laatste behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon of aan artificieel licht blootstelt. Als uw huid na deze 2 weken nog rood is, mag u de huid nog niet blootstellen aan de zon. Bescherm uw behandelde huid zorgvuldig met zonnebrandcrème gedurende de hele periode waarin u haar verwijdert. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan uw huid opzwellen of leiden tot blaren, een tijdelijke of permanente verkleuring van de huid of de huid kan bleker of donkerder worden.

Uw elōs cartridge/scheerapparaat/epilator/ gezichtsadapter vervangen

Ga naar onze website www.mepower.com om een nieuwe cartridge, epilator, scheerapparaat of gezichtsadapter te kopen.





Als de indicator voor een lege cartridge begint te knipperen, is uw elōs-cartridge bijna leeg en is het tijd om een nieuwe te kopen. Als de indicator blijft branden, is de cartridge leeg en moet u deze vervangen.





Uw elos cartridge vervangen:

1. Zorg ervoor dat het mē-systeem is uitgeschakeld en het stroomsnoer niet meer in het stopcontact steekt.
2. Verwijder de gebruikte cartridge door de cartridge aan de zijkanten vast te nemen en voorzichtig uit het apparaat te trekken.
3. Neem de nieuwe cartridge uit de beschermende verpakking. Raak het glas niet aan. Vingerafdrukken of olie afkomstig uit de huid kunnen het licht dat door het glas schijnt tegenhouden en een succesvol resultaat verhinderen.
4. Schuif de nieuwe cartridge voorzichtig in de applicator tot u een "klik" voelt.
5. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk alvorens het mē-systeem in te schakelen.
6. Schakel het mē-systeem in.

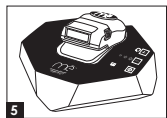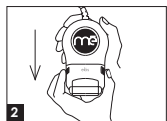

Uw elōs cartridge/scheerapparaat/epilator/ gezichtsadapter vervangen

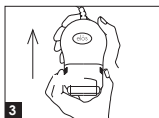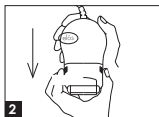

Uw aangewezen mē-scheerapparaat, epilator of gezichtsadapter vervangen

1. Zorg ervoor dat het mē-systeem is uitgeschakeld en het stroomsnoer niet meer in het stopcontact steekt.
2. Verwijder de beschermingskap door deze aan beide kanten vast te nemen en voorzichtig uit de applicator te trekken.
3. Neem het scheerapparaat, de epilator of de gezichtsadapter uit de beschermende verpakking. Schuif het scheerapparaat, de epilator of de gezichtsadapter voorzichtig in de applicator tot u een "klik" voelt.
4. Plaats de applicator in de slede van het voetstuk alvorens het mē-systeem in te schakelen.
5. Schakel het mē-systeem in.

Gebruikte cartridges verwijderen

Stap 1. Als u nog geen nieuwe cartridge heeft, plaatst u de beschermingskap op de plaats van de oude cartridge om de interne onderdelen van het systeem te beschermen.

Stap 2. Volg de wetgeving van uw woonplaats voor de verwijdering van elektrische systemen zoals het voetstuk, handstuk of wegwerpcartridges. Voor meer informatie of vragen neemt u contact met ons op via www.mepower.com.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

reizen met mē

Het mē-systeem is ontworpen met een universele spanning. Dat betekent dat u het systeem overal ter wereld kunt gebruiken. U heeft wel een adapter voor de stekker nodig, want elektrische stopcontacten kunnen per land verschillen. Zorg ervoor dat het mē-systeem niet nat wordt als u reist. Niet in een vochtige omgeving gebruiken. Het is aangeraden om uw mē-apparaat te beschermen als u op reis bent. U kunt de speciaal ontworpen reistas afzonderlijk kopen op www.mepower.com.

problemen oplossen

Indicator	Wat betekent het?	Wat moet ik doen?
Apparaat		
De lampjes branden niet	De stroomkabel is niet aangesloten	Sluit de stroomkabel aan.
Alle lampjes voor elōs energie-instellingen knipperen (Hoog-Medium-Laag)	Er is geen elōs-energieniveau geselecteerd	Selecteer een elōs-niveau. De ventilator in de applicator zal worden geactiveerd. Dit geeft aan dat de cartridge actief is.
De elōs-startknop op de applicator knippert	Het elōs-energieniveau is geselecteerd maar de elōs-startknop is nog niet ingedrukt	Druk op de elōs-startknop. De ventilator in de applicator zal worden geactiveerd. Dit geeft aan dat de elōs-cartridge actief is.
De startknop knippert oranje	Er is een fout ontdekt	Start het systeem opnieuw op door het uit en opnieuw in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, trek de stroomkabel uit en wacht tot alle lampjes uit zijn (enkele seconden). Sluit de stroomkabel vervolgens opnieuw aan en schakel het systeem in. Als het waarschuwinglampje blijft branden, ga dan naar een koelere ruimte met een temperatuur van minder dan 30°C/86° en start het systeem opnieuw op.
Er komen geen flitsen uit het apparaat	1. De zilveren RF-staafjes maken geen contact met de huid in de te behandelen zone 2. elōs De startknop werd niet ingedrukt of het elōs-energieniveau werd niet geselecteerd	Zorg ervoor dat aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan om een lichtpuls uit te zenden: elōs het niveau is geselecteerd, de elōs-startknop is ingedrukt en de zilveren RF-staafjes maken contact met de huid

problemen oplossen

Indicator	Wat betekent het?	Wat moet ik doen?
De eiòs-energieknop op het voetstuk knippert	De cartridgegleuf is leeg	Plaats een cartridge of de beschermingskap
De accessoirestartknop op het voetstuk knippert	De accessoiregleuf is leeg	Plaats de gezichtsadapter, een accessoire (scheerapparaat/epilator) of de beschermingskap.
De indicator voor het cartridgegeniveau knippert	Het aantal resterende pulsen in de eiòs-cartridge is laag	Bereid een nieuwe cartridge voor en houd deze bij de hand
De indicator voor het cartridgegeniveau blijft knipperen	Er zijn geen resterende pulsen meer in de eiòs-cartridge	Plaats een nieuwe eiòs-cartridge
Andere		
Mijn huid is rood na de behandeling	De huid kan door de behandeling rood worden. Dit verdwijnt meestal binnen 24 uur	Als de roodheid meer dan 24 uur na de behandeling nog steeds niet is verdwenen, stop dan met het gebruik van mē en raadpleeg uw arts of onze klantenservice
Ik zie bijna geen haar-reductie	Zorg dat u de behandelingsinstructies en -tijdstippen nauwgezet volgt.	De resultaten variëren van persoon tot persoon en naargelang de plaats op het lichaam die werd behandeld en of u de instructies nauwgezet hebt gevolgd. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp
Ik voel een zekere warmte als ik de lichtflitsen uitzend. Is dit normaal?	Het is mogelijk dat u warmte, tintelingen of jeuk voelt. Mogelijke ongemakken of warmte zou mild moeten zijn.	Als het ongemak ernstig/intens is of meer dan 24 uur na de behandeling aanhoudt, stop dan met het gebruik van de mē en raadpleeg uw arts of onze klantenservice

Als het probleem met het mē-systeem aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

garantie en service

Let op: Als uw apparaat onder de garantie valt van uw lokale verdeler, dan hebben die voorrang op de onderstaande garantievoorwaarden.

Uw mē-apparaat is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 12 maanden (tenzij anders aangegeven door uw lokale verdeler) vanaf de datum van aankoop. De garantie voor de cartridge is 3 maanden geldig vanaf de datum van aankoop of 50% gebruik – indien dat vroeger is. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper met een origineel bewijs van aankoop en alleen wanneer het product is aangekocht bij een erkende mē-winkel of -wederverkoper. Als het product een defect vertoont tijdens de garantieperiode, neem dan contact met ons op

via www.mepower.com of met uw lokale winkel/distributeur.

Syneron Beauty Ltd. ("Syneron") behoudt zich het recht om een defect product te vervangen door het meest vergelijkbare product dat op dat moment beschikbaar is. Uw enige rechtsmiddel in geval van een defect product dat door deze garantie wordt gedekt, is de reparatie of vervanging van het defecte product. De volledige aansprakelijkheid van Syneron voor elk defect product kan in geen geval de oorspronkelijke aankoopprijs van het defecte product overstijgen.

Deze garantie dekt geen producten waarbij Syneron heeft vastgesteld dat ze werden beschadigd door een van de volgende oorzaken: ongeluk, misbruik, wijzigingen, gebruik door onbevoegde personen, gebruik met onbevoegde accessoires of gebruik dat niet voldoet aan de gebruikershandleiding, aansluiting op een onjuiste stroomsterkte of spanning en/of elke andere voorwaarde die buiten de controle van Syneron ligt.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS SYNERON NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT, MET INBEGRIIP VAN ALGEMENE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE – VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE GARANTIE DIE IN DIT DOCUMENT WORDT VERMELD, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE VOOR DIT PRODUCT DOOR SYNERON WORDT GEGEVEN EN VERVANGT ELKE ANDERE VERKLARING EN/OF GARANTIE, MET INBEGRIIP VAN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VERKOOPBAARHEID.

garantie en service

De verpakings- en verzendkosten van het defecte product zullen door de koper van het product worden vergoed en de retourkosten zullen door Syneron worden vergoed, tenzij in het geval dat Syneron vaststelt dat het product niet defect is of niet onder de garantie valt. In dat geval zullen de verpakings- en verzendkosten door de koper van het product worden vergoed.

gegevens van de fabrikant

Het mē-systeem wordt geproduceerd door Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty, die zich het recht voorbehoudt om wijzigingen toe te brengen aan zijn producten of specificaties om de prestaties, betrouwbaarheid en maakbaarheid te verbeteren. De informatie die door Syneron Beauty wordt geleverd, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Syneron Beauty is echter niet aansprakelijk voor het gebruik. Er wordt geen licentie geïmpliceerd of anderszins verstrekt door enig patent of door patentrechten van Syneron Beauty. Geen enkel deel van dit document mag worden geproduceerd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of anderszins, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syneron Beauty.

Syneron Beauty heeft patenten en patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal in dit document. De levering van dit document geeft geen gebruiksrecht op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij voor zover uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst van Syneron Beauty.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Neem voor meer informatie over het mē-systeem contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

Let op: Het ontwerp het het systeem kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

gegevens van de fabrikant

labels en symbolen

Het etiket met het naamplaatje vindt u op de onderkant van het mē-systeem. Hierop staan de naam en het adres van de fabrikant, het onderdeel- en serienummer van het systeem en de elektrische en wettelijke normen waaraan het systeem voldoet.



AEEA - Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Volg de gebruikershandleiding



Apparatuur van klasse I I



Beschermingsgraad tegen elektrische onderdelen van type BF



Niet in een vochtige omgeving gebruiken.



CE-markering

Beschermingsgraad tegen insijpeling van water: IPX2; IP22

Dit apparaat is niet geschikt om in de buurt van ontvlambare narcotische middelen met lucht of met zuurstof of distikstofmonoxide te worden gebruikt.

gegevens van de fabrikant

- Lichtspectrum: 550 – 1200 nm
- Max Optical: 4J/cm²
- Frequentie van radiogolven: 6,78 MHz
- Max. vermogen van radiofrequentie: 5 Watt
- Herhalingsfrequentie van de lichtpulsen: tot 1.1 Hz (1 puls elke 0,9 seconde)
- Configuratie van de stekker: UK, AU, EU, US
- Geldende normen:

Veiligheidsnormen

- IEC/EN 60335-1:2010 5^e Ed. / 2012
- EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2010
- IEC 60601-1:2005 3^e Ed. / EN 60601-1:2006 3^e Ed.
- IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2^e Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2^e Ed.
- IEC 60601-1-11:2010
- SI 900 deel 1:2006; deel 2.8:2001; deel 2.23:2009

EMC Normen

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
- EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3:2008
- IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibiliteit

- ISO 10993-1:2010

MISC-standaard

IEC 62301 2^e Ed. 2011-01;

Elektrisch vermogen: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht 20,5 x 15 x 9 cm [B x L x H] 1,17 Kg

gegevens van de fabrikant

acceptabele omgevingsomstandigheden

Let op: Het systeem zal niet werken in een ruimte met een kamertemperatuur hoger dan 86°F (30°C). Als het systeem werd bewaard in een vochtige ruimte, laat het dan een uur drogen voordat u het gebruikt.

acceptabele omgevingsomstandigheden

Bewaring en transport

Temperatuur	10°C - 55°C (50°F- 131°F)
Vochtigheid	90% bij 55°C (131°F)
Druk	700-1060hPa

Tijdens gebruik:

Temperatuur	10°C - 30°C (50F- 86°F)
Relatieve vochtigheid	tot 80% bij 37°C (99°F)
Hoogte	Tot 3900 m (13.000 ft)

contactgegevens

Als u problemen ondervindt met het mē-systeem of graag meer informatie wenst over het mē-systeem, neem dan contact op met onze klantenservice op www.mepower.com.

mē™



Activate your warranty for mē and receive product updates and special offers at
www.mepower.com



© March 2015 All rights reserved. Illuminage and mē are trademarks of Illuminage Beauty Ltd. and may be registered in certain jurisdictions. Publication HU-PB00341NL.