

Table des matières

| | |
|--|----|
| Introduction | 3 |
| Pour quel usage mē a-t-il été conçu ? | 3 |
| Le système mē | 4 |
| Consignes de sécurité importantes | 7 |
| Quand ne pas utiliser mē/contre-indications | 7 |
| Avertissements | 9 |
| Effets secondaires possibles et réactions cutanées | 10 |
| Comment utiliser l'appareil mē | 11 |
| Test de sensibilité cutanée | 12 |
| Traitement avec mē | 12 |
| Nettoyage et stockage de mē | 19 |
| Soins après traitement | 20 |
| Comment remplacer la cartouche/le rasoir/l'épilateur/ la cartouche elōs/adaptateur facial | 21 |
| Voyager avec mē | 23 |
| Dépannage | 23 |
| Garantie et service | 25 |
| Informations du fabricant | 26 |
| Contact | 29 |

Introduction

Félicitations pour votre achat de l'appareil mē! mē est un appareil d'épilation novateur qui peut être utilisé dans le confort et l'intimité de votre maison.

mē est le seul épilateur permanent que l'on peut utiliser à domicile et appliquant la technologie brevetée elōs. Il est cliniquement éprouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau. Il est doux et facile à utiliser et le traitement ne dure que quelques minutes. Vous pouvez maintenant profiter d'une peau soyeuse et lisse, sans les tracas du rasage et de l'épilation.

Avant d'utiliser mē, visitez notre site Web www.mepower.com, enregistrez votre appareil mē et visionnez notre vidéo de démonstration.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Teint de peau

mē peut être utilisé sur le corps et le visage, sur TOUS les teints de peau (votre couleur de peau naturelle).

Corps et visage :



Couleur du poil

mē peut être utilisé sur TOUTES les couleurs de poil.

Remarque : pour des résultats efficaces, utilisez l'épilateur mécanique pour le traitement des poils sur le corps naturellement blonds, roux et blancs/gris. L'épilateur ne doit pas être utilisé sur le visage.

Pour quel usage mē a-t-il été conçu ?

Parties du corps

mē peut être utilisé par les femmes et les hommes pour les poils sur les parties du corps situées en-dessous du cou et par les femmes pour les poils sur le visage, en-dessous des joues.

Remarque : Le traitement facial est différent du traitement corporel. Veuillez à lire intégralement le manuel de l'utilisateur avant de commencer à utiliser l'appareil.

mē système

Contenu de l'emballage mē :

- Système mē optimisé par la technologie elōs
- Une cartouche elōs (déjà installée)
- Une plaque de protection d'accessoire (déjà installée)
- Une plaque de protection elōs
- Un câble d'alimentation électrique
- Le manuel de l'utilisateur et un guide de référence rapide
- La carte de garantie
- Des lunettes de protection

Autres accessoires mē :

Vendus séparément ou avec votre appareil mē.

- Rasoir
- Épilateur
- Adaptateur facial
- Cartouche de remplacement elōs
- Pochette de rangement

Pour plus de détails sur les accessoires, consultez notre site Web www.mepower.com.

mē système

Composants de l'appareil (Figure 1) :

1. unité de base.
2. socle.
3. le panneau de commande comprenant:
 - ① bouton de mise en marche
 - elōs boutons de niveaux de puissance, avec trois niveaux : Faible, Moyen, Élevé.
 - un indicateur de cartouche vide montre que la cartouche elōs est terminée et doit être remplacée.
 - ⏻ bouton d'activation d'un accessoire
4. applicateur (pièce à main avec câble)
5. cartouche elōs avec fenêtre de sortie de la lumière et barres de contact RF.

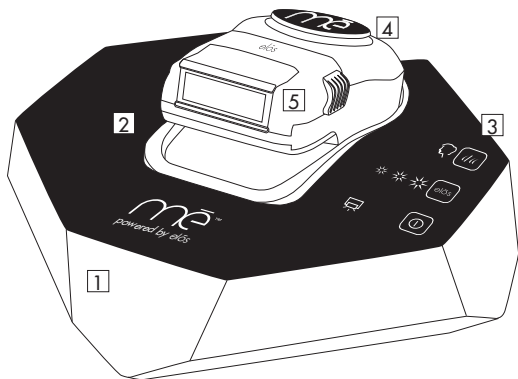


Figure 1 : système mē

mē système

composants de l'applicateur (Figure 2) :

6. une fenêtre de sortie de la lumière :

7. barres de contact RF argentées (les deux barres RF en argent doivent être entièrement en contact avec la peau pour que les impulsions lumineuses produisent des flashes).

8. cartouche elōs: reliée à l'applicateur et pré-chargée avec des impulsions lumineuses elōs. Remplacez la cartouche lorsque le voyant de l'indicateur de cartouche vide, situé sur l'unité de la base, devient rouge.

9. bouton d'activation elōs.

10. sortie de refroidissement.

11. plaque de protection d'accessoire *

*Si vous n'avez pas de cartouche de remplacement, veillez à mettre le bouchon de protection elōs à la place de la cartouche usagée. afin de protéger les pièces internes de l'applicateur.

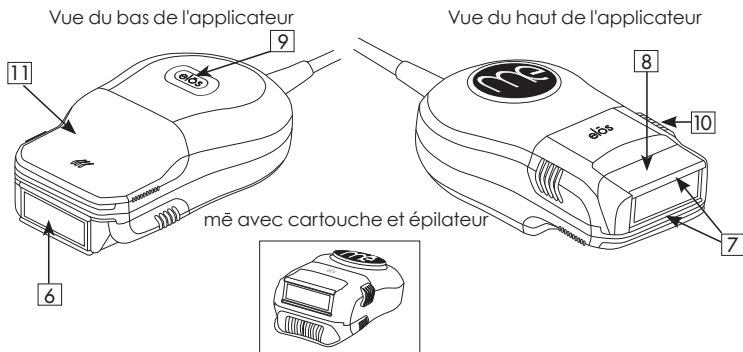


Figure 2 : Vue du haut et vue du bas de l'applicateur

Consignes de sécurité importantes



Ce symbole apparaît à côté d'informations sur des risques possibles de sécurité.

L'appareil mē ne peut pas être utilisé par tout le monde. Lisez le présent manuel avant d'utiliser mē. Veuillez à respecter tous les avertissements. Veuillez également à ne pas utiliser l'appareil s'il ne vous convient pas (voir la section Contre-indications ci-dessous). Si vous ne comprenez pas les avertissements ou avez des questions, veuillez contacter le service clients sur le site www.mepower.com.

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes bronzé ou avez un coup de soleil sur la partie que vous souhaitez traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si votre peau est bronzée après exposition au soleil ou à des UV artificiels ou après application d'une crème auto-bronzante au cours des 2 dernières semaines. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou brûlée peut entraîner un blanchiment ou un assombrissement de la peau, temporaire ou permanent. Si vous n'êtes pas sûr de l'état de votre peau, **NE PAS** utiliser l'appareil pendant les 2 prochaines semaines. Durant ces 2 semaines,



NE PAS exposer au soleil la partie à traiter.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez, mē n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines.

Les flashes peuvent provoquer de violents maux de tête et des migraines.



NE PAS utiliser l'appareil sur les tatouages, les taches brunes de beauté ou les points noirs (taches de rousseur, taches de naissance, grains de beauté ou verrues). Les tatouages ou les grains de beauté peuvent absorber trop d'énergie lumineuse entraînant une tumescence de la peau, des boursouffures temporaires ou permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.



NE PAS utiliser l'appareil autour des yeux, sur la tête, les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Cela pourrait entraîner une tumescence de la peau, des boursouffures temporaires ou

Quand ne pas utiliser mē/Contre-indications



permanentes ou une décoloration/un blanchiment de la peau.

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes âgé de moins de 18 ans. Les effets de l'utilisation de mē sur ce groupe d'âge sont inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de formation de cicatrices chéloïdiennes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible à la lumière, y compris des agents non-stéroïdiens anti-inflammatoires (l'aspirine, les ibuprofens, le cetaminophen, par exemple), des tétracyclines, des phénothiazines, des thiazidiques, des diurétiques, de la sulfonylurée, des sulfamides, de la dacarbazine, du fluorouracile, de la vinblastine, de la griséofulvine, de l'alphahydroxyacide (AHA), de la bêtahydroxyacide (BHA), de la Retin-A, de l'Accutane et/ou des rétinoïdes.



NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme cutané dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces symptômes peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement pourrait donner une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Attendre que les zones infectées soit guéries avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du niveau de cicatrification de votre peau pour utiliser l'appareil, consultez votre médecin.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un dispositif pour l'incontinence, une pompe à insuline, etc. L'utilisation du système mē n'a pas été testée chez les personnes porteuses d'implants actifs, leurs effets sont par conséquent inconnus.



NE PAS utiliser l'appareil si vous avez été traité à l'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois. Cela peut rendre la peau plus sensible à la lumière et le traitement inconfortable ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou des infections.

Avertissements



NE PAS ouvrir le boîtier extérieur de l'appareil mē ou la cartouche, ou toucher les pièces internes. C'est une question de sécurité. N'essayez pas de réparer votre appareil mē. Essayer d'ouvrir l'appareil mē peut également l'endommager et entraîner l'annulation de votre garantie. Veuillez contacter le service clients, sur le site www.mepower.com si l'appareil est cassé ou endommagé et doit être réparé. Le non-respect de ces avertissements peut causer une électrocution ou un choc électrique.



NE PAS utiliser l'appareil mē dans un évier/une baignoire/une douche ou là où il pourrait rentrer en contact avec des liquides ou se mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique. Si le système tombe dans un liquide, débranchez-le immédiatement. Ne Pas retirer l'appareil du liquide avant de l'avoir débranché. Ne Pas réutiliser l'appareil. Contactez le service clients.



NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela provoque une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement la fenêtre de traitement sur une autre zone de la peau. Avant de retourner à une zone déjà traitée, attendez au moins 10 secondes.



NE PAS utiliser mē si l'une de ses pièces semble endommagée. Vous risqueriez de vous blesser.



NE PAS couvrir les orifices de ventilation durant l'utilisation de l'appareil car ils permettent à l'appareil de refroidir pendant son fonctionnement. L'appareil pourrait alors surchauffer.



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS! mē est un appareil puissant et ne doit pas être utilisé par une personne de moins de 18 ans.

Avertissements



NE PAS laisser mē sans surveillance en présence d'enfants. Les câbles présentent un risque d'étouffement. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



NE PAS utiliser mē si votre peau est sensible à la lumière. Le traitement par la lumière pourrait provoquer une sensation d'inconfort ou causer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser mē, effectuez un test sur une petite parcelle de peau. Attendez 30 minutes pour vous assurer qu'aucune réaction cutanée ne se produit. Si vous n'observez aucune réaction cutanée et que la peau semble normale, vous pouvez utiliser mē.
Voir les étapes des tests, page 12.



NE PAS utiliser mē sur une zone où vous souhaitez que vos poils repoussent.




NE PAS utiliser l'appareil à une température supérieure à 30°C.
Si l'appareil chauffe, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement et entraîne des blessures.

Effets secondaires et réactions cutanées possibles


Utiliser mē peut entraîner un certain nombre d'effets secondaires. Ces réactions sont rares et disparaissent rapidement. Tout traitement cosmétique peut présenter un certain niveau de risque. Si vous observez l'une des réactions suivantes, arrêtez le traitement et consultez un médecin: changements de couleur ou de texture de la peau pouvant être définitifs, rougeur importante de la peau, démangeaisons sur la zone traitée, crise d'acné, cloques ou brûlures sur la peau, cicatrices permanentes, perte de tissu cutané ou douleurs inhabituelles.

Comment utiliser l'appareil mē

FR

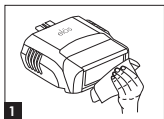

1

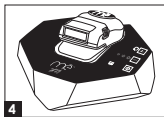

4



6



8

Configuration de mē


1. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool, afin qu'il n'y ait aucune trace de poils ou de poussière sur la fenêtre de traitement.
2. Branchez le câble d'alimentation sur le mē.
3. Posez l'appareil mē sur une table ou un endroit proche d'une prise murale. Retirez tout liquide se trouvant à proximité.
4. Veillez à ce que l'applicateur soit bien sur son socle avant de mettre l'appareil mē.
5. Branchez le câble d'alimentation sur la prise murale.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Attendez que le voyant se trouvant près du bouton d'alimentation s'allume en vert. Le système est maintenant prêt à l'emploi.
7. Sélectionnez le niveau de puissance souhaité : High (élevé), Medium (moyen) ou Low (faible).
8. La cartouche est pré-chargée avec un nombre d'impulsions défini pour votre utilisation. Lorsque l'indicateur de cartouche vide se met à clignoter, cela signifie qu'il ne reste qu'un nombre limité d'impulsions dans la cartouche et vous devez en préparer une nouvelle. Lorsque l'indicateur de cartouche vide est allumé en permanence, remplacez la cartouche.

Remarque : si vous ne ressentez aucune gêne avec le niveau FAIBLE elōs, vous pouvez augmenter le niveau elōs, pour un résultat plus efficace.

Test de sensibilité cutanée

Avant d'utiliser le système pour la première fois, choisissez une petite zone à proximité de la zone que vous avez l'intention de traiter, afin d'effectuer un test de sensibilité de la peau. Utilisez le niveau elōs LOW (FAIBLE). Suivez les instructions de traitement suivantes mais veillez à n'émettre que 2 à 3 flashes de lumière. Après le test cutané, attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si, après 30 minutes, la peau semble normale, vous pouvez alors effectuer un traitement complet.

Traitement avec mē

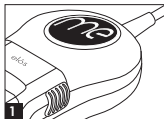

Corps :

Étape n°1. À votre convenance, vous pouvez utiliser l'épilateur mē ou les accessoires de rasage pour raser les poils. Il ne sera alors pas nécessaire de procéder aux préparations avant le traitement. Assurez-vous simplement que les poils ne dépassent pas 0,5 cm. Retirez la plaque de protection et insérez à la place la cartouche d'épilation ou de rasage.

Si vous n'utilisez pas le rasoir ou l'épilateur mē, servez-vous d'un rasoir manuel ou électrique. Assurez-vous que la plaque de protection (fournie) est insérée. Le système ne fonctionnera pas si la plaque de protection ou l'épilateur/le rasoir n'est pas en place.

Étape n°2. Nettoyez votre peau et séchez-la avec une serviette.

Étape n°3. Appuyez sur le bouton elōs, sur la base et sélectionnez le niveau elōs approprié (Faible, Moyen, Élevé). Appuyez de nouveau sur le bouton elōs pour passer au niveau Moyen, puis de nouveau pour passer au niveau Élevé. Pour revenir au niveau Faible, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton elōs.

Nous vous recommandons de commencer par le niveau Faible et, si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs.



Traitement avec mē

FR



4


Étape n°4. Si vous utilisez également le rasoir/l'épilateur, appuyez une fois sur le bouton d'activation de l'épilateur/ du rasoir, situé sur le panneau de commande, pour lancer le mécanisme d'épilation à basse vitesse. Au besoin, appuyez de nouveau pour activer l'épilateur à grande vitesse. La cartouche de rasage ne fonctionne qu'au niveau de vitesse 1.



6

Étape n°5. Retirez l'applicateur de la base.

Étape n°6. Appuyez sur le bouton d'activation elös situé sur l'applicateur. Vous commencerez à entendre le ventilateur à l'intérieur de l'applicateur.

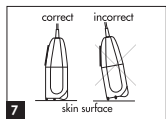

7

Étape n°7. Posez délicatement l'applicateur sur la peau, de manière à ce que les deux barres RF argentées soient entièrement en contact avec la peau. L'appareil mē commence à émettre des impulsions.

Remarque : L'applicateur ne fonctionne que si les deux barres RF argentées touchent la peau.

Étape n°8. Après chaque flash, déplacez l'applicateur vers la zone cutanée voisine par un glissement lent et continu.

Remarque : L'applicateur se met automatiquement hors tension si aucune impulsion n'a été émise en continu pendant 30 secondes. Pour remettre l'applicateur en marche, appuyez sur le bouton d'activation elös situé sur l'applicateur.

NE PAS tenir immobile la fenêtre de l'applicateur au-dessus de la même zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Cela peut provoquer une accumulation de chaleur et peut entraîner un gonflement cutané, des cloques ou une modification temporaire ou permanente de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez l'applicateur sur une autre zone de la peau.

Attendez au moins 10 secondes avant de revenir à une zone déjà traitée.

Traitement avec mē

Étape n°9. Pour des résultats efficaces, il faut utiliser mē, au moins conformément aux durées indiquées ci-dessous:

Les durées de traitement recommandées sont des valeurs minimales et peuvent varier selon la condition physiologique de l'utilisateur. Nous vous recommandons de couvrir chaque zone de traitement avec 2 à 3 impulsions.



2 minutes



1 minute
par aisselle



2 minutes
pour zone de maillot



3 minutes
par bras



10 minutes
par jambe entière



2 minutes
par épaule




5 minutes
pour l'abdomen



6 minutes
pour le torse



12 minutes
pour le dos

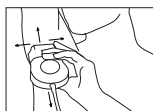

Conseils : lorsque vous utilisez le système sur des zones difficiles à traiter (telles que les aisselles) passez l'applicateur sur la zone dans les deux sens : de gauche à droite et de haut en bas, pour être certain de couvrir toute la zone.

Vous pouvez traiter toutes les zones du corps au cours de la même séance.


Procédures de traitement

Il est normal de voir encore des poils après les premiers traitements. Pour de meilleurs résultats, les traitements doivent être effectués une fois par semaine, pendant les 7 premières fois. Effectuer des traitements supplémentaires d'entretien, chaque mois, après les 7 premiers traitements, permettra de faire durer plus longtemps les résultats de l'épilation.



FR

Traitement avec mē

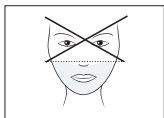

Visage :

L'épilation des poils indésirables sur le visage est très différente de l'épilation du reste du corps. L'appareil mē a été conçu pour épiler le visage, à partir des joues et jusqu'au cou, notamment la moustache/la lèvre supérieure, la zone du menton et la partie supérieure du cou. L'appareil mē n'a pas été conçu pour épiler les sourcils, les poils du nez ou les poils dans les oreilles. Lisez attentivement cette section avant de commencer à vous épiler le visage avec mē. Pour le traitement du visage, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur facial. L'adaptateur facial a été conçu pour faciliter le traitement des zones plus petites

et plus délicates du visage. Lorsque l'adaptateur facial est relié à votre applicateur, il libère de l'énergie en mode pulsé unique, au niveau de puissance souhaité. L'adaptateur facial peut être acheté directement avec mē, ou séparément, comme accessoire. La conception de l'adaptateur peut changer.

Teint de peau

mē convient à toutes les teintes de peau.

Lors du traitement du visage, utilisez mē deux fois par semaine, pendant 2 semaines. Puis, effectuez des traitements supplémentaires toutes deux semaines, pour que les résultats durent plus longtemps.



Informations générales sur l'épilation faciale

La physiologie des poils du visage est très différente de celle des poils des autres parties du corps. Leur cycle de pousse et leurs caractéristiques sont différentes, notamment l'épaisseur, la couleur et la profondeur de leur follicule sont différentes. Le visage est plus sensible à l'épilation en raison de la sensibilité nerveuse de certaines de ses zones. La peau du visage et du cou est plus susceptible d'être exposée quotidiennement au rayonnement UV du soleil et, par conséquent, peut être plus sensible que d'autres parties de votre corps.

Traitement avec mē

Remarque : pour les hommes, nous ne recommandons pas de traiter la barbe car cela peut donner des résultats inégaux qui pourraient modifier, de façon indésirable, les caractéristiques de votre visage.

mē ne doit pas être utilisé sur le visage dans les cas suivants :

En cas de coup de soleil ou de bronzage sur le visage, attendez qu'il s'atténue avant d'effectuer un test sur une zone dissimulée de votre corps (sous le menton, par exemple). Examinez de nouveau la zone après 3 jours pour vérifier l'absence de tout effet secondaire, puis commencez le traitement. Si vous avez effectué un traitement facial professionnel (tel qu'un peeling chimique, un traitement par fréquence laser/lumière/radio ou des comblements dermiques par injection) au cours des 3 derniers mois, veuillez consulter un médecin.

Si vous avez subi une chirurgie faciale (de type lifting ou implant facial) au cours des trois derniers mois ou si vous êtes toujours en cours de rétablissement, veuillez consulter votre médecin. Si vous prenez des médicaments entraînant une sensibilité au soleil ou que votre passé médical comporte des troubles de la peau, consultez votre médecin avant d'utiliser mē sur votre visage ou sur une toute autre partie de votre corps.

Veuillez vous reporter à la liste générale des contre-indications, que vous trouverez au début de ce manuel de l'utilisateur.

Avertissements



NE PAS utiliser l'appareil au-dessus des joues.



NE PAS utiliser l'épilateur ou le rasoir lorsque vous utilisez mē sur le visage.



NE PAS exposer au soleil les zones traitées pendant toute la durée du traitement. Attendez au moins 2 semaines après le traitement avant d'exposer la peau traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposer au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant

Traitement avec mē

toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment de la peau, temporaire ou permanent.



NE PAS traiter l'orbite ou la zone autour des yeux.



NE PAS utiliser pour l'épilation des sourcils! Il est important d'éviter de traiter les sourcils par mégarde car les poils épilés risquent de ne pas repousser.



Pour les hommes, NE PAS traiter la zone de la barbe. Les résultats pourraient être inégaux.



NE PAS traiter les grains de beauté ou les marques de naissance. Protégez les petites zones de peau sensible tels que les grains de beauté, les marques de naissance, etc. en utilisant un eye-liner blanc. Pour les zones plus larges de peau sensible, utilisez un morceau de carton ou du papier épais pour couvrir la zone concernée et empêcher une exposition au traitement. Protégez les lèvres et le bord des lèvres en utilisant un eye-liner blanc.



NE PAS traiter une zone tatouée ou portant un maquillage permanent.



NE PAS traiter le cuir chevelu.




NE PAS traiter l'intérieur des narines ou des oreilles, ce sont des zones particulièrement délicates.

Évitez de traiter des zones recouvertes d'un duvet (poils fins et très minces), car cela pourrait entraîner une repousse des poils indésirable. Dans le cas peu probable où des changements de pigmentation apparaîtraient sur votre visage, veuillez cesser immédiatement le traitement et consulter votre médecin.



NE PAS utiliser de produits parfumés ou de maquillage pendant les heures qui suivent le traitement, cela pourrait entraîner une légère irritation. Si vous ressentez une douleur inhabituelle pendant le traitement, veuillez l'arrêter immédiatement. Des rougeurs temporaires peuvent apparaître sur la peau pendant les 24 heures qui suivent le traitement. Si les symptômes persistent pendant plus de 24 heures et/ou vous ressentez une gêne importante et/ou de graves effets secondaires se produisent, cessez immédiatement le traitement et consultez votre médecin.

Traitement avec mē

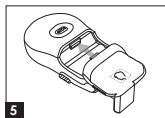

Comment utiliser l'appareil

1. Nettoyez bien la peau et éliminez les poils sur la surface de la peau. Vous pouvez utiliser une pince à épiler, de la cire, un rasoir, etc., mais pas un épilateur.

2. Effectuez le traitement dans un environnement bien éclairé. Allumez votre appareil mē. Sélectionnez le niveau elōs LOW (Faible), sur l'unité de base. L'appareil ne fonctionnera pas si vous ne choisissez pas un niveau de réglage d'énergie elōs.

3. Utilisez les lunettes de protection ou de soleil incluses dans l'emballage. Il est recommandé de vous protéger les yeux car le traitement près de vos yeux peut causer une gêne temporaire.

Avec un adaptateur facial

4. Retirez la plaque de protection de l'accessoire puis branchez l'adaptateur facial. L'adaptateur facial émet uniquement des impulsions uniques, au niveau de puissance souhaité.

5. Appuyez sur le bouton d'activation de la cartouche elōs situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. Appuyez une fois sur le bouton d'activation elōs pour émettre une seule impulsion.

6. Posez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter puis appuyez de nouveau sur le bouton d'activation elōs pour émettre une nouvelle impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Sans adaptateur facial

4. Appuyez sur le bouton d'activation elōs, situé sur l'appli-


Traitement avec mē

cateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. À la mise en contact avec la peau, une impulsion est émise. Retirez l'applicateur après l'impulsion.

5. Placez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter, émettez une nouvelle impulsion, puis retirez l'applicateur après l'impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.


Remarque : Commencez toujours par le niveau elōs LOW (faible). Si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elōs pour un résultat plus efficace.

Nettoyage et stockage de mē

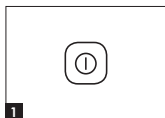

1

1. Éteignez votre appareil mē en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur l'unité de base.

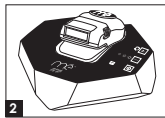


2

2. Reposez l'applicateur sur son socle, sur l'unité de base, et débranchez le câble électrique.

3. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool,

4. Si vous avez utilisé l'épilateur ou le rasoir mē : retirez le rasoir ou l'épilateur de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place. Nettoyez les accessoires avec une brosse de nettoyage. Il est conseillé d'utiliser également un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

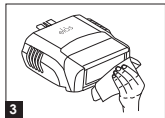

3

5. Si vous avez utilisé l'adaptateur facial mē : retirez l'adaptateur facial de l'applicateur et remettez la plaque de protection à la place.

Nettoyez la surface extérieure UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

Nettoyage et stockage de mē

- Nettoyez la surface extérieure du système mē UNIQUEMENT avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Soins après traitement

Rincez délicatement la peau à l'eau tiède et séchez-la en tapotant.



NE PAS exposer les zones traitées au soleil. Attendez au moins 2 semaines après le traitement, avant d'exposer la partie traitée au soleil ou à des UV artificiels. Même après 2 semaines, vérifiez qu'aucune rougeur n'apparaît sur la peau traitée avant de vous exposez au soleil. Protégez bien la peau traitée en appliquant un écran solaire pendant toute la durée du traitement. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un gonflement de la peau, des cloques, une décoloration ou un blanchiment cutané, temporaire ou permanent.

Comment remplacer la elōs cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur facial

Consultez notre site Web www.mepower.com, pour acheter une cartouche, un épilateur, un rasoir ou un adaptateur facial de remplacement.




Lorsque l'indicateur de cartouche vide se met à clignoter, cela signifie que la cartouche elōs est presque vide et qu'il est temps que vous en achetiez une nouvelle. Lorsque l'indicateur est constamment allumé, cela signifie que la cartouche est vide et que vous devez la remplacer.




Remplacement de la cartouche elōs :

1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.

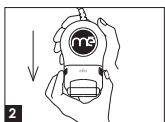


2. Retirez la cartouche usagée en tenant chaque extrémité de l'applicateur et en la tirant délicatement.

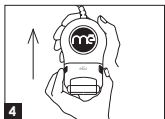

3. Sortez la nouvelle cartouche de son boîtier de protection. Évitez de toucher le verre. Des empreintes digitales ou des taches grasses empêcheraient la lumière de passer à travers le verre, réduisant ainsi les résultats du traitement.

4. Faites-la glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

5. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.

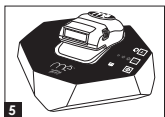

6. Allumez l'appareil mē.

Comment remplacer la elōs cartouche/le rasoir/ l'épilateur/l'adaptateur facial




1



2



3

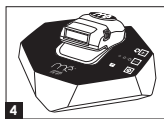

4

Remplacement du rasoir mē, de l'épilateur ou de l'adaptateur facial:

1. Vérifiez que l'appareil mē est éteint et qu'il est débranché de la prise murale.
2. Retirez le capuchon de protection de l'applicateur en tirant doucement dessus.
3. Sortez le rasoir, l'épilateur ou l'adaptateur facial de son boîtier de protection. Faites-le glisser délicatement dans l'applicateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Avant d'allumer l'appareil, l'applicateur doit être posé sur le socle de l'unité de base mē.
6. Allumez l'appareil mē.

FR

Mise au rebut des cartouches usagées

Étape n°1. Si vous ne disposez pas d'une nouvelle cartouche, remettez la plaque de protection à la place de la cartouche usagée afin de protéger les pièces internes du système.

Étape n°2. Veuillez respecter les réglementations en matière de mise au rebut des systèmes électriques en vigueur dans votre pays de résidence pour le recyclage ou la mise au rebut de votre unité de base, de l'applicateur ou de la cartouche jetable. Pour toutes questions, veuillez nous contacter sur le site Web www.mepower.com.



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

voyager avec mē

Le système mē a été conçu pour fonctionner à une tension universelle. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser partout dans le monde. Il vous faudra néanmoins utiliser un adaptateur de prise, puisque les prises électriques murales varient selon les pays. Veillez à ce que le système mē ne se mouille pas durant vos déplacements. Ne pas l'utiliser dans un environnement humide. Il est recommandé de protéger votre appareil mē durant vos déplacements. Vous pouvez acheter une pochette de voyage séparément, sur le site Web www.mepower.com.

Dépannage

| Voyant | Signification | Que faire |
|--|---|---|
| Appareil | | |
| Aucun voyant allumé | Le câble d'alimentation n'est pas branché | Branchez le câble d'alimentation |
| Tous les boutons de niveau de puissance (Faible, Moyen, Élevé) | Aucun niveau de puissance n'a été sélectionné | Sélectionnez un niveau de puissance. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active |
| Le bouton d'activation de l'applicateur clignote | Le niveau de puissance a été sélectionné mais le bouton d'activation n'a pas encore été actionné. | Appuyez sur le bouton d'activation. Le ventilateur de l'applicateur se met en marche indiquant que la cartouche est active. |
| Le bouton de mise en marche est de couleur orange et clignote | Une erreur a été détectée | Redémarrez l'appareil en l'éteignant puis en le rallumant. Si le problème persiste, débranchez le câble d'alimentation puis attendez (quelques secondes) que les voyants s'éteignent. Rebranchez le câble d'alimentation puis allumez l'appareil. Si le voyant d'erreur est toujours allumé, essayez de passer sur une zone plus froide, dans une pièce à une température inférieure à 30°C, puis redémarrez l'appareil |

Dépannage

| Voyant | Signification | Que faire |
|---|--|---|
| Aucune impulsion ne se produit | <ol style="list-style-type: none"> Les barres de contact RF argentées ne sont pas en contact avec la peau, sur la zone de traitement Le bouton d'activation n'a pas été actionné ou le niveau de puissance n'a pas été sélectionné | Pour que le système émette des flashes, assurez-vous de respecter les 3 conditions suivantes : niveau de puissance sélectionné, bouton d'activation actionné, barres de contact RF argentées sont en contact avec la peau |
| Le bouton de puissance, situé sur la base clignote | La fente de la cartouche est vide | Insérez une cartouche ou fermez la fente avec la plaque de protection |
| Le bouton d'activation de l'accessoire, situé sur la base, clignote | La fente de l'accessoire est vide | Insérez l'adaptateur facial, ou l'accessoire (rasoir/épilateur), ou la plaque de protection |
| L'indicateur de niveau de la cartouche clignote | Le nombre d'impulsions restant dans la cartouche est peu élevé | Préparez une nouvelle cartouche |
| L'indicateur de niveau de la cartouche est constamment allumé | Il ne reste plus d'impulsions dans la cartouche | Insérez une nouvelle cartouche |
| Autre | | |
| Des rougeurs apparaissent sur ma peau après le traitement | Il se peut que le traitement provoque des rougeurs sur la peau. Ces rougeurs disparaissent en général dans les 24 heures | Si les rougeurs persistent pendant plus de 24 heures après le traitement, cessez immédiatement d'utiliser le mē et consultez votre médecin ou le service client |
| Je remarque à peine l'épilation | Suivez scrupuleusement le protocole suggéré et respectez la durée de traitement recommandée | Les résultats varient d'une personne à l'autre, selon la zone traitée et en fonction du respect des instructions. Contactez le service client en cas de besoin |
| Je ressens des sensations de chaleur au moment des impulsions lumineuses. Est-ce normal ? | Il se peut que vous ressentiez des sensations de chaleur, de picotement et de démangeaison. Les sensations de gêne et de chaleur devraient diminuer | Si la gêne devient plus forte ou persiste pendant plus de 24 heures après le traitement, interrompez immédiatement le traitement et consultez votre médecin ou le service client |

Si les problèmes persistent avec l'appareil mē, contactez le service client via le site Web www.mepower.com.

Garantie et service

Remarque : si vous avez reçu une note de garantie de votre distributeur local, elle prévaut sur les conditions de garantie ci-dessous

FR

Votre appareil mē est garanti contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d'un an (ou comme indiqué par votre distributeur local) à partir de la date d'achat originale, dans des conditions normales d'utilisation. La cartouche est garantie 3 mois, à compter de la date d'achat ou de l'utilisation à 50 %, la première des deux prévalant. Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur au détail, possédant la preuve d'achat originale, et uniquement si l'appareil a été acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur autorisé mē. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, contactez-nous, via

le site Web www.mepower.com, ou contactez votre distributeur local.

Iluminage Beauty Ltd. (« Iluminage ») se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par un produit comparable, actuellement disponible. Votre recours exclusif pour tout produit défectueux couvert par la cette garantie limitée est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. L'entière responsabilité de Iluminage pour tout produit défectueux ne doit en aucun cas dépasser le prix d'achat original du produit défectueux.

Cette garantie ne couvre pas les produits dont Iluminage détermine qu'ils ont été endommagés par ce qui suit : accident, mauvaise utilisation, abus ou altération, entretien par des personnes non autorisées, utilisation d'accessoires non autorisés ou l'utilisation autre que celle indiquée, la connexion à une tension incorrecte et/ou toute autre condition hors de contrôle de Iluminage .

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, Iluminage NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS DES DOMMAGES GÉNÉRAUX, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU INDIRECTS, DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE

Garantie et service

PAR LA LOI. LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE FOURNIE PAR Illuminage POUR LE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE REPRÉSENTATION ET/OU GARANTIE, Y COMPRIS L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET À LA QUALITÉ MARCHANDE.

Les frais d'emballage et d'expédition du produit défectueux doivent être payés par l'acheteur du produit et l'emballage et l'expédition de retour seront payés par Illuminage sauf dans le cas où Illuminage détermine que le produit n'est pas défectueux ou n'est plus sous garantie, auquel cas l'emballage et les frais d'expédition seront à la charge de l'acheteur du produit.

Informations du fabricant

L'appareil mē est fabriqué par Illuminage Beauty Ltd. Illuminage Beauty se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits ou aux spécifications pour améliorer les performances, la fiabilité ou la fabrication. Les informations fournies par Illuminage Beauty sont considérées comme exactes et fiables. Cependant, Illuminage Beauty n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation. Aucune licence n'est accordée par son implication ou autrement, en vertu des droits de brevet ou d'un brevet de Illuminage Beauty. Aucune partie de ce document ne peut être produite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou autre, à toutes fins, sans l'autorisation écrite expresse de Illuminage Beauty.

Illuminage Beauty détient des brevets et des demandes de brevet, des marques, des droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle couvrant le sujet du présent document. La remise de ce document ne donne aucun droit sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, sauf stipulation expresse contraire dans un accord écrit de Illuminage Beauty.

Les spécifications ont sujettes à changement sans préavis.

Pour plus d'informations sur le système mē, contactez le service clientèle, sur le site www.mepower.com.

Remarque : la conception du système peut changer sans préavis.

Informations du fabricant

Étiquettes et symboles

L'étiquette signalétique est collée sur la base de votre appareil mē. Elle indique le nom et l'adresse du fabricant, le numéro des pièces et de série du système, les spécifications électriques et les normes réglementaires auxquelles doit se conformer le système



Déchet d'équipements électriques et électronique (DEEE)



Suivre les instructions suivantes



Équipement de classe II



Niveau de protection contre la pièce appliquée de type électrique BF.



Ne pas l'utiliser dans un environnement humide.



Marque de Certification CE

Niveau de protection contre la pénétration de l'eau : IPX2 ; IP22

Ce dispositif n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable avec de l'air, d'oxygène ou d'oxyde nitreux.

Informations du fabricant

Spectre lumineux : 550 – 1200 nm

Optique max. : 4J/cm²

Fréquence d'ondes RF : 6,78 MHz.

Puissance max. de radiofréquence : 5 watts

Fréquence de répétition de la lumière pulsée : jusqu'à 1,1 Hz (1 impulsion toute les 0,9 secondes)

Configuration de prise : R.-U., AU, UE, É.-U

Normes applicables :

Normes de sécurité

IEC/EN 60335-1:2010 5^è éd. / 2012

EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008

EN 60335-2-23: 2003

EN 60335-2-27: 2010

IEC 60601-1:2005 3^è éd. / EN 60601-1:2006 3^è éd.

IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2^è éd. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996 2^è éd.

SI 60601-1-11:2010

SI 900 partie 1:2006 ; partie 2.8:2001 partie 2.23:2009

Normes EMC

EN 61000-6-1 : 2007

EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3 : 2008

EN 61000-3:2008

IEC 60601-1-2: 2007

Biocompatibilité

ISO 10993-1:2010

Norme MISC

IEC 62301 2^è éd. 2011-01;

Tension nominale : 100-240 VCA, 50-60 Hz

Dimensions et poids : 20,5 x 15 x 9 cm (l x L x h) 1,17 Kg

Informations du fabricant

Conditions de fonctionnement acceptables

Remarque : Le système ne fonctionne pas à une température supérieure à 30°C. Si le système a été stocké dans un endroit très humide, laissez-le sécher pendant une heure avant de l'utiliser.

Stockage et transport

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Température | 10°C - 55°C |
| Humidité | 90 %, à 55°C |
| Pression | 700-1060hPa |
| Fonctionnement : | |
| Température | 10°C - 30°C |
| Humidité relative | Jusqu'à 80 % à 37°C |
| Altitude | Jusqu'à 3 900 m |

Contact

En cas de problèmes avec le système mē ou si vous souhaitez plus d'informations sur le système mē, contactez le service clients, sur le site www.mepower.com.